

COMPTEUR DE PARTICULES CLIMET

MODELE CI-754



Contenu du kit

- Batterie
- Filtre absolu
- Sonde isocinétique
- Clé USB
- Papier thermique
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation en français
- Certificat d'étalonnage

Ultra-rapide : prélever 1 mètre cube en moins de 15 minutes.

Le CI-754 est un compteur de particule portable, compact, autonome avec un débit de 75 l/min : les temps de prélèvements sont réduits de façon significative.

D'une programmation aisée et conviviale (large écran couleur TFT tactile), il permet l'édition de rapports complets selon l'ISO 14-644-1 et les BPF.

Le CI-754 est conforme à la norme 21 CFR Part 11.

Les résultats peuvent être mémorisés sur une clé USB et sont directement exploitables sur Excel (fichiers .csv).

Le + produit

- Compteur portable 75 L/min
- Rapports complets selon ISO14-644-1 et BPF
- Programmation conviviale et aisée
- Large écran couleur TFT tactile
- Imprimante intégrée
- Boîtier inox
- Sortie RS232 / Ethernet / clé USB


NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com



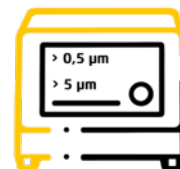

COMPTEUR DE PARTICULES CLIMET MODÈLE CI-754

Gamme de mesures :	0,3 ; 0,5 ; 1 et 5 microns
Principe de mesure :	Diffraction lumineuse. Diode laser, 780 nm
Débit :	75 L/min (contrôlé par débitmètre volumique). Pompe : turbine brevetée.
Ecran :	Nouvelle technologie TFT : écran couleur tactile à grande lisibilité et clavier alpha numérique intégré
Volume de prélèvement :	Ajustable par l'utilisateur
Programmes :	30 programmes mémorisés
Id lieu de prélèvement :	100 Id par programme, de 16 caractères alpha numériques chacun
Temps de purge :	Ajustable par l'utilisateur (délai initial + temps de pause)
Unité de mesure :	Sélectionnable : particules/litre ou particules/pied cube ou particules/m ³
Batterie :	Interne, autonomie 2 heures
Calculs :	Edition de rapports selon la FS-209-E, l'ISO 14644-1 et les BPF
Alarmes :	Ajustable sur les 4 canaux de tailles et débit de la pompe. Bip pour test d'efficacité des filtres
21 CFR 11 :	ID appareil, ID utilisateur, mot de passe pour chaque utilisateur, 4 niveaux de sécurité avec une authentification utilisateur
Poids, matériau :	6,500 kg, boîtier Inox
Dimensions :	22 x 21,6 x 24,1 cm
Options :	Diluteur, trépied, diffuseur de gaz

